


# Flocare<sup>®</sup> Micromax pumpe

Enteral ernæringspumpe til ambulant eller stasjonært bruk.

**Flocare<sup>®</sup> Micromax pumpe** er en peristaltisk enteral ernæringspumpe for kontinuerlig eller bolustilførsel av sondeernæring. Audio- og visuelle alarmfunksjoner sørger for trygg bruk.

**Flocare<sup>®</sup> Micromax pumpe** skal kun brukes sammen med Flocare<sup>®</sup> Micromax sett.

Vi gjør oppmerksom på at Flocare<sup>®</sup> Micromax pumpe ikke produseres lengre. Flocare<sup>®</sup> Micromax sett produseres ut 2009.

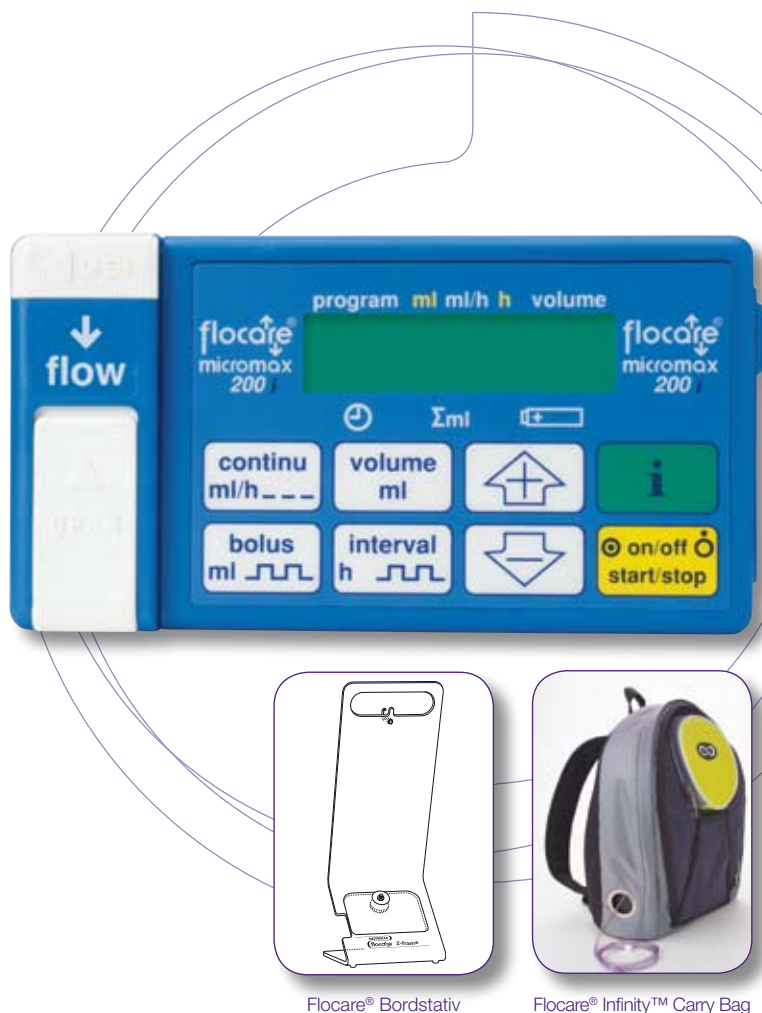

**Bestillingsinformasjon:** Denne pumpen er ikke lenger til salgs.

## Flocare® Micromax pumpe

### Indikasjon:

Til administrasjon av sondeernæring ved kontrollert hastighet.  
En enteral ernæringspumpe bør alltid brukes ved tilførsel av sondeernæring direkte i tynntarmen, ved korttarm syndrom og ved risiko for aspirasjon.

Tilstander som diaré, kvalme/brekninger og redusert mavekapasitet kan også hjelpes ved å administrere sondeernæringen med en enteral ernæringspumpe. Enteral ernæringspumpe anbefales ved tilførsel av sondeernæring om natten, ved oppstart av enteral ernæring og ved overgang til sondeernæring med høy energitetthet.

### Advarsel:

Flocare® Micromax pumpe skal kun brukes til administrasjon av enteral ernæring.  
Hold avstand fra mobil- og trådløse telefoner da det er rapportert at slik kan interfere med medisinsk utstyr.

### Tekniske data:

- Maximum programmerbar volum er 4000 ml.
- Hastighet: 5-400 ml/t i 1 ml intervaller.
- Bolus volum: 1-500 ml i 1 ml intervaller.
- Bolus hastighet: 800 ml/t.
- Bolus intervalltid: 1-9 timer i 1 time intervaller.
- 24 timers minne for programmerte informasjon.
- Informasjon tastatur for å vise volum sondeernæring som er gitt, tid som gjenstår for å ferdigkjøre programmet og gjenstående batterikapasitet (ved stasjonær bruk).  
Batteri kapasitet vises kontinuerlig ved ambulans bruk.
- Batterikapasitet: 20 timer eller 4000 ml. Oppladningstid er 4 timer.
- "Keep Tube Open" funksjon gir flow-rate på 5 ml/t etter programmert volum er gitt ferdig.
- Audio-visuelle alarmer for:
  - Dose Komplet – når den foreskrevne dose er gitt.
  - Okklusjon
  - Luftbobler i enteralt ernæringssett
  - Lav batteri
  - "Hold time out" – advarer at ernæringstilførsel er brutt når "Hold" er aktivert mer enn 3 min.
  - Error alarm for automatisk kontroll av pumpens interne mekaniske funksjoner.
- Presisjon: Ved kontinuerlig tilførsel: 6,5 %. Ved bolus tilførsel: 20 % opptil 20 ml, >20 ml: 6,5 %.
- Vekt: ca. 455 g.

**Må kun brukes med Flocare® Micromax sett.**

Fullstendig brukermanual på norsk følger med pumpen.