

Flocare® Micromax sett

Engangs enteralt ernæringssett til bruk med Micromax pumpe.
Fri for DEHP og andre ftalater.

De ulike Flocare® Micromax sett er for tilkoping av sondeernæring til nasalsonder, PEG sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper når tilførsel skjer via Flocare® Micromax pumpe. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk.

Flocare® Micromax Pack sett er for tilkoping av alle Nutrison sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje.


Flocare® Micromax universal sett er for tilkoping av både Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer.

Flocare® Micromax Pack sett for ambulant bruk er uten dråpekammer og er utviklet for mobilt bruk.

I samsvar med flere offentlige anbefalinger er all Nutricias plastmateriale nå fri for ftalater. Nutricia har fjernet ftalatmykgjører DEHP og den har blitt erstattet med DINCH (di(isononyl)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate), en ny plastmykgjører som er helt fri for ftalater og andre skadelige komponenter.


Bestillingsinformasjon:

Vi gjør oppmerksom på at Flocare® Micromax pumpe ikke produseres lengre. Flocare® Micromax sett produseres ut 2009.

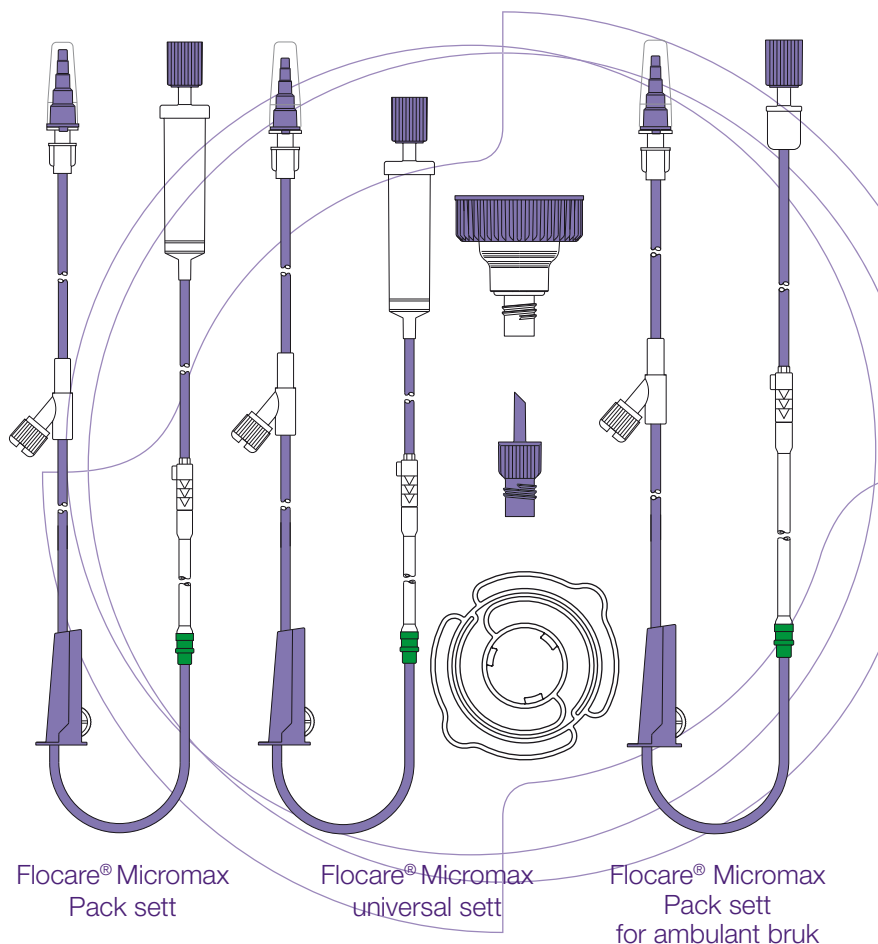

	Nutricias varenr.	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare® Micromax Pack sett	35148	854349	1 sett
Flocare® Micromax universal sett	35143	972471	1 sett
Flocare® Micromax Pack sett for ambulant bruk	35157	920890	1 sett
Flocare® Multi koblingsstykke	35743	901544	1 x 30 stk.

Flocare® Micromax sett

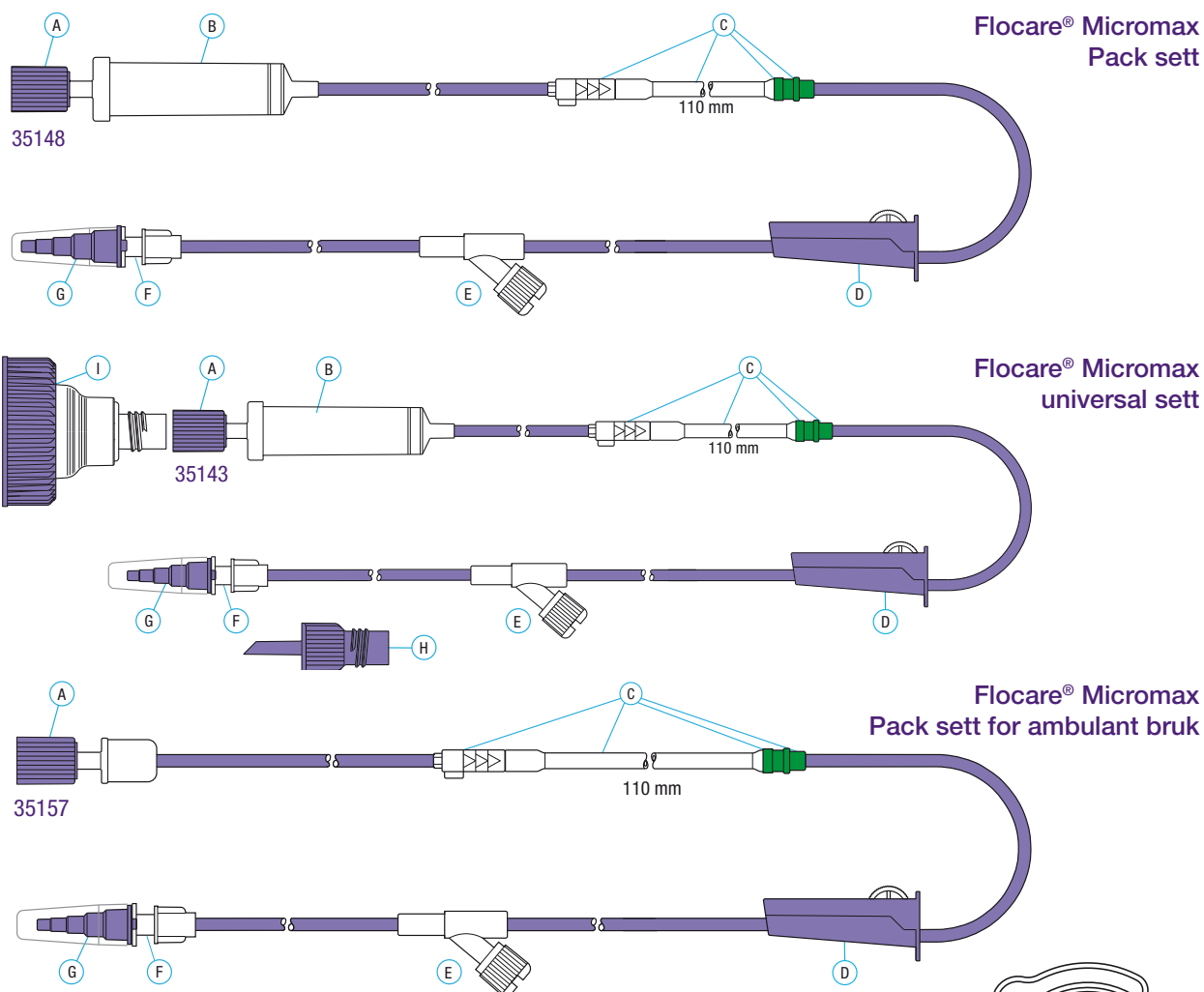

Flocare® Micromax sett består av:

- A : Pack konektor med skru- og nedfeldt punkteringselement
- B : Dråpekammer (*Sett for ambulant bruk er uten dråpekammer)
- C : Flocare® Micromax pumpesegment
- D : Rulleklemme
- E : Y-kobling til medisinaladministrasjon og gjennomskylling (med hette)
- F : Female luer-lokk konektor
- G : 5 trinns konektor (ikke IV kompatibel) med støvhette
- H : Multi koblingsstykke (følger med universal sett for pose og flaske)
(kan også bestilles separat til mobilsettet)
- I : Flaskekonektor til glass- og tåteflasker (følger med universal sett)
- J : Flaskeoppheng (følger med universal sett)

Varianter:

Pack sett til bruk med Nutricias sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje
Universal sett til bruk med Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer
Pack sett til ambulant bruk

Materiale:

Medisinsk kvalitet PVC, fri for ftalater.

Emballasje:

Enkeltvis sterilt pakket.

Holdbarhet:

36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring:

Lagres ved romtemperatur.

Brukstid:

24 timer.