


# Flocare® PEG

## Gastrostomisonde (Perkutan endoskopisk gastrostomi)

Gastrostomisonde for plassering i ventrikkelen ved hjelp av gastroskop (pull teknikk).

**Flocare® PEG** gastrostomisonde består av en klar sonde laget av polyuretan med en innvendig retensjonsplate av silikon. Tre røntgen-tette linjer langs lengden av sonden gjør det enkelt å bekrefte plasseringen av PEG med røntgen. PEG sonden er utstyrt med en universal matingskonnektor med internasjonal fargekoding for raskt å kunne identifisere Ch størrelse.

Den klare polyuretansonden gjør det enkelt å se om sonden er skylt etter bruk. Den klare, utvendige fikseringsplaten i silikon gjør det lett å inspisere stomiområdet.

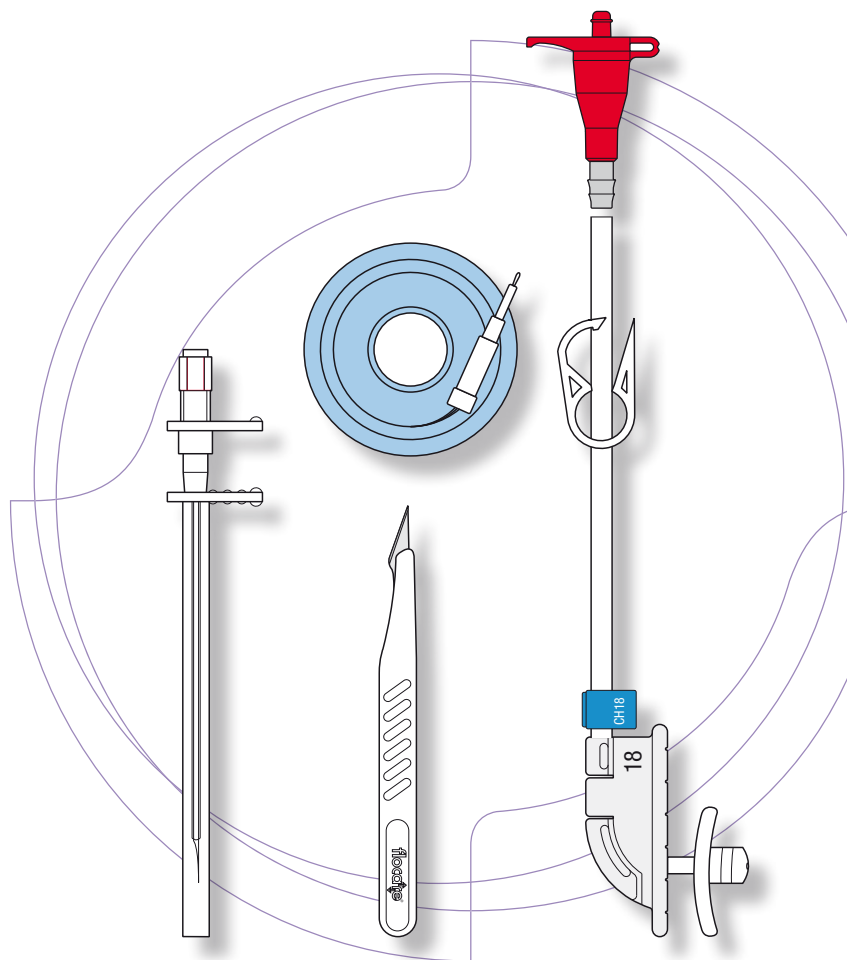


### Bestillingsinformasjon:

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare® PEG sett Ch 10 (sort)	804492	1 sett
Flocare® PEG sett Ch 14 (grønn)	804518	1 sett
Flocare® PEG sett Ch 18 (rød)	804526	1 sett
<b>Tilbehør</b>		
<b>Utbyttbar matingskonnektor til PEG</b>		
Flocare® Ch 10 (sort)	809251	1 stk.
Flocare® Ch 14 (grønn)	809285	1 stk.
Flocare® Ch 18 (rød)	809293	1 stk.
<b>Utvendig fikseringsplate</b>		
Flocare® Ch 10	808980	1 stk.
Flocare® Ch 14	809087	1 stk.
Flocare® Ch 18	809095	1 stk.

## Flocare® PEG Gastrostomidesett består av:

- A: 40 cm klar, polyuretansonde
  - Centimeter avstandsmerker opp til 12 cm fra innvendig retensjonsplate
  - 3 røntgentette linjer langs hele lengden av sonden
- B: Innvendig retensjonsplate av silikon
- C: Utvendig fikseringsplate av klar silikon
- D: Klemme
- E: Sikkerhetsklemme for fiksering av PEG sonden
- F: Matingskonnektor av polyuretan med fargekoding Ch 10: sort, Ch 14: grønn, Ch 18: rød
- G: Skalpell (nr. 11)
- H: Punksjonsnål med hul kanyle
- I: Spole med dobbeltråd av polyamid for å trekke PEG på plass

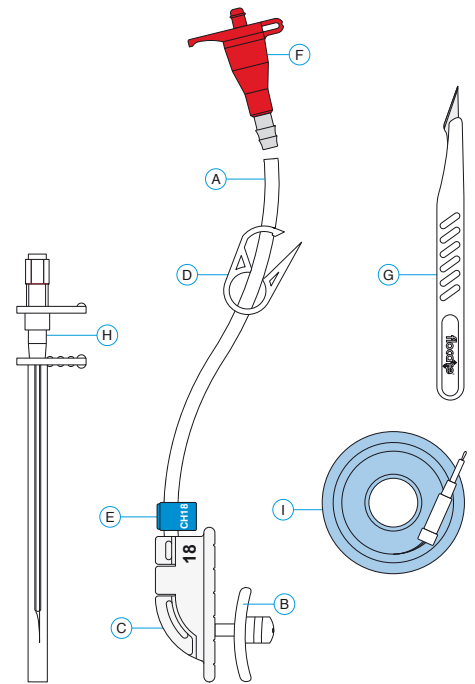

**Størrelser:** Ch 10, 14, 18.

**Indikasjon:** Ved behov for langvarig sondeernæring (over 2-3 uker). Behov for ventrikkeltømming eller -dekompresjon.

**Kontraindikasjoner:** Peritonitt, akutt pankreatitt, ileus, forstyrrelser i blodkoagulering. Mislykket gjennomlysning fra ventrikkelen. Manglende evne til å få ventrikkelveggen og bukveggen sammen.

**Forsiktighetsregler:** Ascites, kreft i peritoneum, sterk nedsatt sårtilheling, Mb. Crohn med fistula, tidligere øvre gastrointestinal kirurgi.

**Tilbehør:** Utbyttbar matingskonnektor. Ekstern fikseringsplate.

**Holdbarhet:** 60 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.

**Oppbevaring:** Lagres ved romtemperatur.

**Brukstid:** Brukstid er vanskelig å angi da det kan variere mye avhengig bl.a. av mengde magesyre, medisiner og type sondeemat som gis. Antatt brukstid er ca. 6 mndr.

Etter at magesekken er vokst til bukveggen og stomikanalen er grodd, kan man med fordel bytte over til Flocare® G-tube eller Flocare® cuBBY™.

### Bruerveiledning Flocare® PEG sonde:

1. Løsne fikseringsplate og inspiser stomien daglig.
2. Vask rundt stomien med varmt såpevann daglig. Skyll og tørk huden godt.
3. Sett fikseringsplaten på plass igjen ved hjelp av avstandsmerkene på PEG sonden.
4. Skyll med 20-40 ml vann før og etter bruk.
5. Det anbefales å kontrollere plasseringen av PEG gastrostomisonde minst hver 8. time ved hjelp av pH papir som man setter litt aspirert ventrikkelinhold på. Ved pH ≤ 5,5 er sonden i ventrikkelen. Ved pH > 5,5 anbefales røntgenkontroll av sondens plassering.