

Flocare[®] gravity sett


Engangs enteralt ernæringssett til bruk uten pumpe (gravitasjon). Fri for DEHP og andre ftalater.

De ulike Flocare[®] gravity sett er for tilkoping av sondeernæring til nasalsonder, PEG sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper når tilførsel skjer uten bruk av pumpe (gravitasjon). Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk.

Flocare[®] gravity Pack sett er for tilkoping av alle Nutrison sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje.

Flocare[®] gravity universal sett er for tilkoping av både Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer.


I samsvar med flere offentlige anbefalinger er all Nutricias plastmateriale nå fri for ftalater. Nutricia har fjernet ftalatmykgjører DEHP og den har blitt erstattet med DINCH (di-(isononyl)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate), en ny plastmykgjører som er helt fri for ftalater og andre skadelige komponenter.

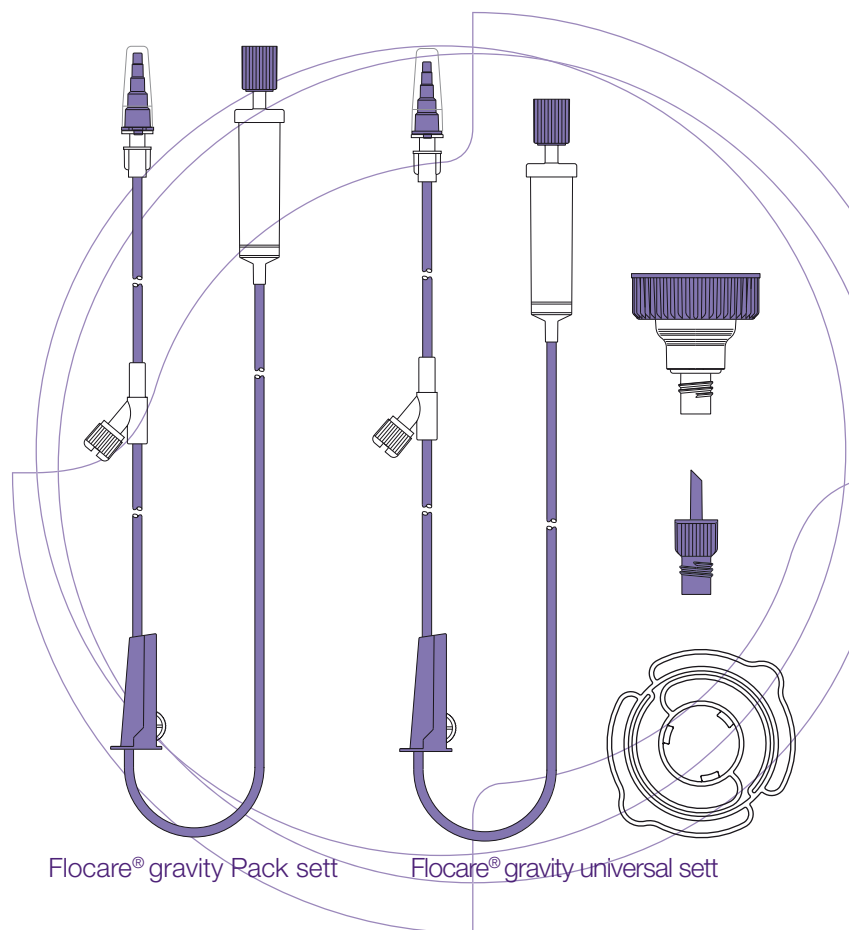

Bestillingsinformasjon:

	Nutricias varenr.	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare [®] gravity Pack sett	35146	854067	1 sett
Flocare [®] gravity universal sett	35141	936066	1 sett

Flocare® gravity sett

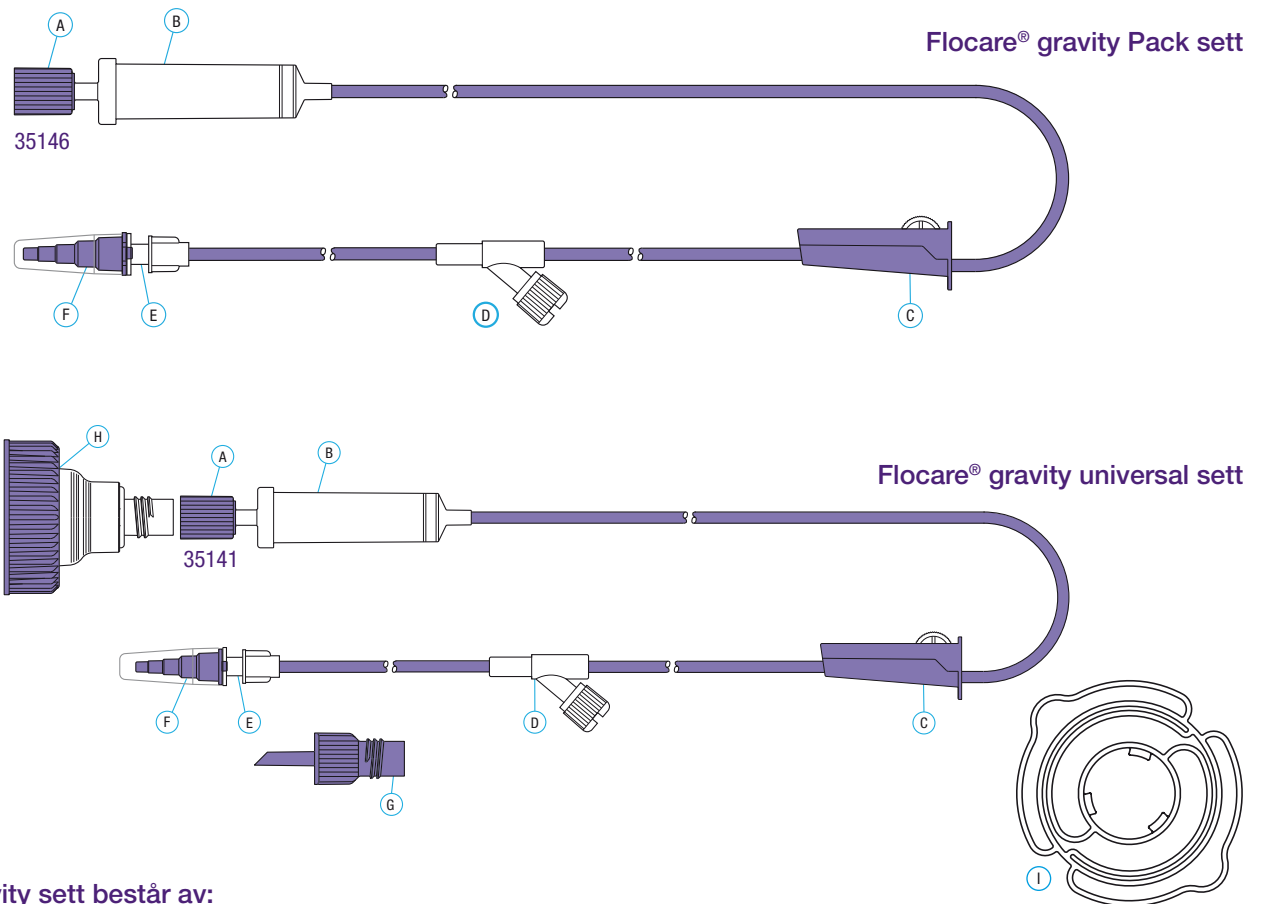

Flocare® gravity sett består av:

- A : Pack konektor med skru- og nedfeldt punkteringselement
- B : Dråpekammer
- C : Rulleklemme
- D : Y-kobling til medisinadministrasjon og gjennomskylling (med hette)
- E : Female luer-lokk konektor
- F : 5 trinns konektor (ikke IV kompatibel) med støvhette
- G : Multi koblingsstykke (følger med universal sett)
- H : Flaskekonektor til glass- og tåteflasker (følger med universal sett)
- I : Flaskeoppheng (følger med universal sett)

Varianter: Pack sett til bruk med Nutricias sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje
Universal sett til bruk med Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer

Materiale: Medisinsk kvalitet PVC, fri for ftalater.

Emballasje: Enkeltvis sterilt pakket.

Holdbarhet: 36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres ved romtemperatur.

Brukstid: 24 timer.